

İleri Yara Bakım  
Ürün Katalođu  
2011-2012

**smith&nephew** alıřanları hergün  
dünyanın herhangi bir yerinde  
bir kiřinin yařam kalitesinin  
arttırılmasına yardımcı olur.






## HOŐGELDİNİZ

Smith & Nephew Ortopedi, Ortopedik Travma, Endoskopi ve İleri Yara Bakımı konusunda dŭnya apında uzmanlaŐmıŐ bir Medikal Teknoloji Őirketidir. Smith & Nephew yara bakım uzmanları olarak biz hi kimsenin gerekmedike 1 dakikadan fazla yara ile yaŐamaması gerektiđine inanmaktayız. Biz bu nedenle eđitim ve deneyimimizi birleŐtirip ileri yara bakım űrűnlerini, en uygun zamanda, en uygun pansumanın, en uygun Őekilde uygulanması iin geliŐtirdik.





 **Smith&nephew** ürününü kullanan insanların memnuniyeti bizim de memnuniyetimizdir.

## İÇERİK

4	ACTICOAT° ACTICOAT° 7	16	BACTIGRAS°
5	ACTICOAT° Flex 3 ACTICOAT° Flex 7	17	BIOBRANE °
6	ACTICOAT° Absorbent	18	CICA CARE°
7	ACTICOAT° Site	19	EXUDRY°
8	ALGISITE° Ag	20	PROGUIDE°
9	ALGISITE° M	21	INTRASITE° Gel INTRASITE° Conformable
10	ALLEVYN° Non Adhesive ALLEVYN° Adhesive ALLEVYN° Ag Non Adhesive ALLEVYN° Ag Adhesive	22	IODOSORB°
11	ALLEVYN° Gentle ALLEVYN° Gentle Border ALLEVYN° Ag Gentle ALLEVYN° Ag Gentle Border	23	IV3000°
12	ALLEVYN° Heel ALLEVYN° Ag Heel ALLEVYN° Gentle Border Heel	24	JELONET°
13	ALLEVYN° Sacrum ALLEVYN° Ag Sacrum	25	MELONIN°
14	ALLEVYN° Tracheostomy	26	OPSITE° Flexigrid
15	ALLEVYN° Cavity	27	OPSITE° Flexifix
		28	OPSITE° Incise
		29	OPSITE° Post op
		30	OPSITE° Post op Visible
		31	OPSITE° Spray
		32	PRIMAFIX°
		33	PRIMAPORE°
		34	VERSAJET° VERSAJET° II
		35	TIME
		38	INDEX

## ACTICOAT<sup>◊</sup>/ ACTICOAT<sup>◊</sup> 7

### SILCRYST<sup>◊</sup> Nanokristal

#### Gümüş Kaplamalı Antimikrobiyal Bariyerli Pansuman - Steril

SILCRYST<sup>◊</sup> – Nanokristal Acticoat pansuman etkili bir antimikrobiyal malzemedir. 30 dakika kadar kısa bir sürede geniş bir bakteri spektrumunu öldürür. 3 güne kadar etkilidir.

SILCRYST<sup>◊</sup> – Nanokristal Acticoat 7 pansuman 7 güne kadar etkilidir.

ACTICOAT<sup>◊</sup> pansuman kısmi ve tam kalınlıklı olan bası yarası, venöz bacak yarası, diyabetik yaralar, yanıklar donör ve alıcı doku greft yerleri için antimikrobiyal bariyer tabakası olarak kullanıma uygundur.



#### S&N Kodu

#### Tanım

#### Paket İçeriği

#### ACTICOAT

66000791	10cm x 10cm	12
66000792	10cm x 20cm	12
66000793	20cm x 40cm	6
66000794	40cm x 40cm	6
66000795	10cm x 120cm	6
66000808	5cm x 5cm	5

#### ACTICOAT 7

66000796	10cm x 12.5cm	5
66000797	15cm x 15cm	5
66000809	5cm x 5cm	5



## ACTICOAT<sup>°</sup> Flex 3/ACTICOAT<sup>°</sup> Flex 7

### SILCRYST<sup>°</sup> Nanokristal

Gümüş Kaplamalı Antimikrobiyal Bariyerli Sargı- steril

ACTICOAT<sup>°</sup> sargı kısmı ve tam kalınlıklı olan bası yarası, venöz bacak yarası, diyabetik yaralar, yanıklar donör ve alıcı doku greft yerleri için antimikrobiyal bariyer tabakası olarak kullanıma uygundur. Elastiki bir yapıdadır.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>ACTICOAT Flex 3</b>		
66800396	5cm x 5cm	5
66800399	10cm x 10cm	12
66800409	10cm x 20cm	12
66800419	20cm x 40cm	6
66800432	40cm x 40cm	6
66800435	10cm x 120cm	6
<b>ACTICOAT Flex 7</b>		
66800395	5cm x 5cm	5
66800397	10cm x 12.5cm	5
66800400	20cm x 40cm	6
66800401	40cm x 40cm	6
66800420	15cm x 15cm	5



## ACTICOAT<sup>®</sup> Absorbent

### SILCRYST<sup>®</sup> Nanokristal

#### Gümüş- kaplamalı antimikrobiyal bariyer Sargı - Steril

ACTICOAT<sup>®</sup> sargı kısmi ve tam kalınlıkta olan bası yarası, venöz bacak yarası, diyabetik yaralar, yanıklar donör ve alıcı doku greft yerleri için antimikrobiyal bariyer tabakası olarak kullanıma uygundur. Acticoat'ın bütün antimikrobiyal avantajlarını emme kapasitesi yüksek alginat ile birleřtirerek nemli bir yara ortamını, yüksek emme gücünü ve pansuman ierisinden yara yatađına dođru iletilen gümüşün antimikrobiyal gücünü sađlar.



S&N Kodu	Tanımı	Paket İeriđi
66000840	2cm x 30cm	5
66000841	10cm x 12.5cm	5

## ACTICOAT<sup>®</sup> Site

### SILCRYST<sup>®</sup> Nanokristal

#### Perkütöz Bölgele için Emici Gümüş Antimikrobiyal Sargı

Enfekte olmuş damar-deri içi giriş bölgelerinin etrafına yerleştirilir.



**S&N Kodu**

**Tanımı**

**Paket İçeriđi**

66001788

2.5 cm disk  
4mm merkezi  
açıklıkla

10

## ALGISITE<sup>°</sup> Ag

### Gümüőü içerikli Kalsiyum Aljinat Örtü

ALGISITE<sup>°</sup> Ag orta- ağır derecede eksudalı bası yaraları, ameliyat sonrası cerrahi yaralar ve fungal lezyonlarda kullanım amaçlıdır.



S&N Kodu	Tanımı	Paket İçeriđi
6680011	5cm x 5cm	10
6680012	10cm x 10cm	10
6680013	10cm x 20cm	5
6680014	2g x 30cm (ip)	5

## ALGISITE<sup>◇</sup> M

### Kalsiyum Aljinat Örtü - Steril

Algisite M normal- kısmi ve tam kalınlıkta, orta- ağır dereceli eksudalı yaralar ve minör kanamalara yüz tutmuş bası ülserleri, bacak ülserleri, cerrahi yaralar, diyabetik ayak ülserleri, kötü huylu yara ve yanıklarda kullanım amaçlıdır.



#### S&N Kodu

#### Tanımı

#### Paket İçeriđi

66000519	5cm x 5cm	10
66000520	10cm x 10cm	10
66000521	15cm x 20cm	10
66000522	2cm x 30cm	5



## ALLEVYN® Non-adhesive/Adhesive/Ag Non-adhesive/Ag Adhesive Poliüretan Örtü -Steril

ALLEVYN® (Non-adhesive) Yapışkansız örtü eşsiz 3 tabakalı özel yapıya sahiptir. İlk katı yapışmaz yaraya temas tabakası, yumuşak ve emici merkezi hidrosellüler orta tabaka ve su ve bakteri geçirmeyen dış film tabakadan oluşur.

ALLEVYN® pansumanın eksudalı bölgede uygulanırken, yapısını bozmadan nemli yaraları iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Sonuç geleneksel yöntemlerle bakımı zor yaraların erken, temiz ve sorunsuz iyileşmesidir.

Nemli bir yara iyileşme ortamı hazırlayarak yara yüzeyinde hızlı acısız ve kolay bir yara iyileşmesi sağlar.

ALLEVYN® (Adhesive) Yapışkan Hidrosellüler Pansuman ALLEVYN® Adhesive Pansuman ALLEVYN® Pansumanın klinik etkilerini destekleyen basit, etkili yöntem ile merkezi olarak sızıntıyı tutma özelliği taşır. Pansuman ALLEVYN® sargının yara temas yüzeyi, merkezi emici tabaka ve bakteri ve su geçirmeyen dış film yüzeyi olan 3 katlı yapısından oluşur.

ALLEVYN® Ag (Non Adhesive) yapışmaz Pansuman

ALLEVYN® Ag Yapışmaz üç katlı emici antimikrobiyal pansumandır:

- Pansumanda, SSD (Gümüş Sülfadiazin) emici hidrosellüler orta tabakada ara kalın destek yüzeyinde yer alırken, delikli yapışmaz yara temas yüzeyi ile su geçirmez dış film tabakaları da mevcuttur.

### Özellikleri

Örtü etkili bariyer özelliği sağlayarak yara içine girebilecek mikroorganizma ve patojenik organizmaları engeller, böylece daha hızlı iyileşme sağlar. SSD, pansumandan kaynaklı ve yara üzerindeki organizmalar üzerinde etkilidir. Yara iyileşmesinde nemli yara ortamı sağlanmasına yardımcı olur.

ALLEVYN® Ag Adhesive (Yapışkan) eksuda emilimi ve kısmiden tam derinlikli yaraların tedavisinde kullanılır. Bazı tipik yaralar:

- Ülserler(venöz, arteriyal, diyabetik)
- Bası Yaraları
- Donör bölgeleri
- Cerrahi insizyonlar
- Cerrahi eksizyonlar
- Yanıklar (1. ve 2. derece)

Yara bölgesindeki nemi optimal düzeyde tutmak yara bakımı için gereklidir. Yara ve dış faktörler arasında bir bariyer görevi oluşturur ve bakterilerle yaranın kontamine olmasını önler.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>ALLEVYN Non Adhesive</b>		
66007643	5cm x 5cm	10
66007637	10cm x 10cm	10
66007335	10cm x 20cm	10
66000093	15cm x 15cm	10
66007638	20cm x 20cm	10
<b>ALLEVYN Adhesive</b>		
66000043-S	7.5cm x 7.5cm	10
66000599-S	10cm x 10cm	10
66000044-S	12.5cm x 12.5cm	10
66000045-S	17.5cm x 17.5cm	10
66000046-S	22.5 x 22.5cm	10
66000744-S	12.5X22.5	10
<b>ALLEVYN Ag Non Adhesive</b>		
66800083	5cm x 5cm	10
66800086	10cm x 10cm	10
66800089	15cm x 15cm	10
66800091	20cm x 20cm	10
<b>ALLEVYN Ag Adhesive</b>		
66800073	7.5cm x 7.5cm	10
66800075	10cm x 10cm	10
66800078	12.5cm x 12.5cm	10
66800081	17.5cm x 17.5cm	10

## ALLEVYN® Gentle/Gentle Border/Ag Gentle/Ag Gentle Border

ALLEVYN® Gentle ve ALLEVYN® Gentle Border pansumanlar gelişmiş 3 tabakalı yapıdadır. Emici hidrosellüler destekli ara yüzey, en dışta su geçirmez dış film yüzey ve delikli yumuşak jelli yara temas yüzeyi arasında sandviç gibi yerleşmiştir.

Gelişmiş 3 tabakalı yapısı ile ALLEVYN® Gentle etkin sıvı yönetimi sağlarken, nemli yara iyileşme ortamı oluşturarak daha çabuk iyileşme ve maserasyon riskinin azalmasını gerçekleştirir.

Yara temas tabakası yapışkan jel ile kaplanması sayesinde daha kolay ikincil retansiyon uygulamaları ve daha ağrısız sargı değişimi gerçekleşir.

ALLEVYN® Ag Gentle eksudalı kısmi ve tam kalınlıklı yaralarda, yatak yarası, diyabetik ülserler, 1. ve 2. derece yanıklar ve donör bölgeleri gibi kullanılır.

ALLEVYN® Ag Gentle debride olmuş ya da kısmi kalınlıktaki yarada kullanılabilir. Aynı zamanda hidrojel özelliği olan INTRASITE® jel ile kombine biçimde nekrotik ya da balçıkımsı yapıda yaralarda kullanılabilir.

ALLEVYN® Ag Gentle hassas ciltlerde güvenle kullanılır.



### S&N Kodu

### Tanım

### Paket İçeriği

#### Gentle

66800247	5cm x 5cm	10
66800248	10cm x 10cm	10
66800249	10cm x 20cm	10
66800250	15cm x 15cm	10
66800251	20cm x 20cm	10

#### Gentle Border

66800269	7.5cm x 7.5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800272	12.5cm x 12.5cm	10
66800273	17.5cm x 17.5cm	10

### S&N Kodu

### Tanım

### Paket İçeriği

#### Ag Gentle

66800464	5cm x 5cm	10
66800465	10cm x 10cm	10
66800466	10cm x 20cm	10
66800467	15cm x 15cm	10
66800468	20cm x 20cm	10

#### Ag Gentle Border

66800460	7.5cm x 7.5cm	10
66800461	10cm x 10cm	10
66800462	12.5cm x 12.5cm	10
66800463	17.5cm x 17.5cm	10

## ALLEVYN® Heel/Ag Heel/Gentle Border Heel


Yapışmaz poliüretan pansuman - Steril

ALLEVYN® Heel ayağın arka kısmını sararak yaraı tam olarak örterken yara ortamının iyileşmeyi hızlandıracak biçimde nemli kalmasını sağlar. ALLEVYN® Heel Yara yüzeyinde nemli yara iyileşme ortamı oluşturarak, eskar oluşum riskini azaltır ve sorunsuz iyileşmeyi hızlandırır.

ALLEVYN® Ag Heel hidroselüler köpük örtü –topuk, krevis ve diğer çıkıntılı bakımı zor bölgelerde destekli koruma görevi görür. ALLEVYN® Ag hidroselüler köpük pansuman eksuda emiliminde ve kısmi ve tam kalınlıklı yaraların iyileşmesinde yönetimde uygundur.

ALLEVYN® Gentle Border Heel örtü üç katlı gelişmiş yapıya sahiptir. Orta yüzeyindeki hidroselüler ped emici özelliğini sağlarken, yara temas yüzeyinde delikli silikon yapışkan jel tabaka, dış yüzeyinde ise yüksek oranda su geçirmez film tabakası vardır.

ALLEVYN® Gentle Border Heel bilek çıkıntıları ve ayağın üst loblarını ve tüm topuk çevresini kaplama özelliği yanında yara tedavisi sırasında ekstra destek ve koruma özelliği gösteren özel tasarımı vardır.

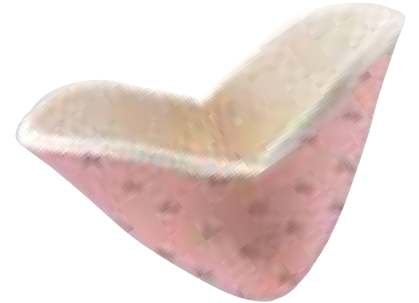

S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>ALLEVYN Heel</b> 66007630	10.5cm x 13.5cm	5
<b>ALLEVYN Ag Heel</b> 66800098	10.5cm x 13.5cm	5
<b>Gentle Border Heel</b> 66800506	23cm x 23.2cm	10

## ALLEVYN® Sacrum/Ag Sacrum

Sacrum alanı bası yaralarının en fazla görüldüğü bölgedir. ALLEVYN® Sacrum sakral bölgenin anatomik yapısına uyum sağlayacak şekilde bası yarası tedavisinde, üstün kalitede, gelişmiş Allevyn Adhesive'in kanıtlanmış yararlılığı örnek alınarak tasarlanmıştır.

### Özellikleri

- Profilli pansuman Kenarları
- Anatomik Şekilli
- Bakteri-Su geçirmez
- Yastıksız rahatlık

### ALLEVYN® Ag Sacrum

Yaraya temas eden tabaka, yumuşak ve yüksek emici hidroselüler, gümüş içeren ara tabaka ve su ve bakteri geçirmez dış film tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuş yapıdadır.

ALLEVYN® Ag Sacrum, ALLEVYN® sunduğu tüm özellikleri yanında antimikrobiyal etki güvencesini de sağlar.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>Sacrum</b>		
66000451-S	22cm x 22cm	10
66000700-S	17cm x 17cm	10
<b>Ag Sacrum</b>		
66800094	17cm x 17cm	10
66800097	22cm x 22cm	10

## ALLEVYN® Tracheostomy

Hidrofilik Poliüretan (Keyhole) (Anahtar delikli) Pansuman - Steril

Emici delikli pansuman trakeostomi ya da yara drenajı olan bölgeler için tasarlanmıştır.

ALLEVYN® Trakeostomi yapışkansız ve anahtar deliđi tasarımı sayesinde geleneksel pansuman deđiştirme sayısını azaltmıştır. 3 güne kadar koruma özelliđi gösterir.

- Farklı çeşitte tüplerin etrafına uygulanır
- Sıvı ve bakterilerin etkileşmesini en aza indirir
- Mükemmel tasarım-çekici görüntü



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriđi
66007640	9cm x 9cm (Keyhole)	10

## ALLEVYN<sup>®</sup> Cavity

### Kavite (Oyuklu) Yara Pansumanı - Steril

Üç boyutlu derin kavite yara pansumanı. Orta ve aşırı derecede eksudalı temiz ve granüle yaralar için yuvarlak ve borumsu olmak üzere iki şekli vardır. Diğer pansuman türlerine kıyasla yara yatağına iplikçik bırakmaz (gaz, aljinat içermez).

Yaraya yapışmayan delikli bir film tabakasının sardığı yüksek emici güce sahip poliüretan köpük taneciklerinden oluşmaktadır.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66007326	5cm Circular	10
66007327	10cm Circular	5
66007328	9cm x 2.5cm Tubular	10
66007329	12cm x 4cm Tubular	5

# BACTIGRAS<sup>®</sup>

## Antiseptik Tül Sargı - Steril


BACTIGRAS<sup>®</sup>, % 0.5 oranında chlorhexidine acetate BP içeren yumuşak parafinle doyurulmuş delikli gazlı\Leno bezidir. Açık örgü tül olan BACTIGRAS<sup>®</sup> steril ve tek tek paketlenmiş aseptik uygulamalarda kullanılan bir üründür. Enfeksiyon riski bulunan minör yanık ve haşlanma, yırtılmalar, deri aşınmalarında ve diğer deri kaybı olan yaralarda düşük yapışkan özelliğinde yara temas tabakası olarak kullanılır, Donör ve alıcı greft bölgelerinde de kullanılır.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66007505	15cm x 1m Rulo	12
7456	5cm x 5cm	50
7457	10cm x 10cm	10
7461	15cm x 20cm	10

## BIOBRANE<sup>®</sup>

BIOBRANE<sup>®</sup>, Kollajenle çapraz bağlantılı bir naylon kumaş üzerine birleştirilmiş bir silikon film tabakasından yapılmış olan bio-sentetik bir yara pansumanıdır. Dokuma, yara yatağına kompleks 3-D yapısında kollajene kimyasal olarak bağlanmış trifilament bir iplik sunar. Naylon matrikste bulunan kan\serum pıhtısı epitelizasyon gerçekleşene kadar yaraya sıkı sıkıya bağlanır.

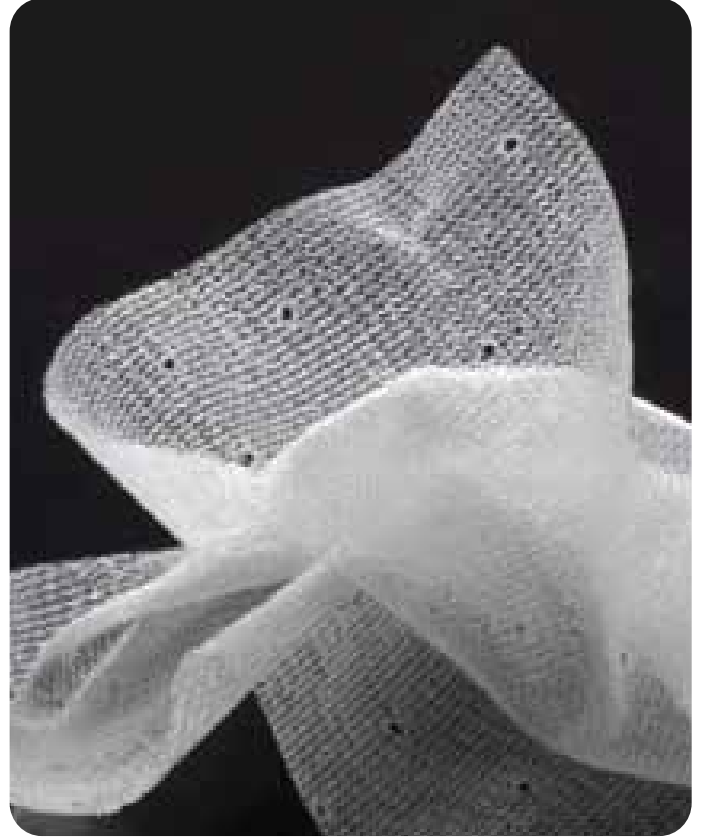

S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>Biobrane Örtü</b>		
66800174	13cm x 13cm	5
66800175	13cm x 38cm	5
66800176	25cm x 38cm	5
66800177	38cm x 51cm	5
66800178	13cm x 13cm	5
66800179	13cm x 38cm	5
66800180	25cm x 38cm	5
<b>Biobrane Eldiven</b>		
66800181	Pediyatrik	2
66800182	Küçük	2
66800183	Orta	2
66800184	Geniş	2

# CICA-CARE<sup>®</sup>

## Silikonlu jel tabaka

CICA CARE<sup>®</sup>, kendiliğinden yapışma özelliğine sahip olan, kızamık, koyu ya da kabarık skarların giderilmesinde %90 etkisi olduğu tıbbi olarak kanıtlanmış silikon tabakadır. Hipertrofik skar ya da keloid özelliği göstermeye meyilli kapalı yaralarda profilaktik kullanıma uygundur.



**S&N Kodu**

**Tanım**

**Paket  
İçeriği**

66250704  
66250707

6cm x 12cm  
12cm x 15cm

Tek  
10



## EXU-DRY®

### Tek Parça kaymaz Yara Örtüsü

EXU-DRY® ağrı ve travmayı hafifletmekle beraber hasta bakım ve tüm pansuman maliyetini azaltmak amaçlı tasarlanmış eşsiz tek parça yara sargısıdır. EXU-DRY® çok tabakalı gazlı bezin ve abdominal ya da cerrahi pansumanların yerini alabilir ve ameliyat sonrası kullanılan gazlı bez kullanımını azaltır. EXU-DRY® yüksek emiş gücüne sahip yapay ipek/selüloz karışımın kaymaz yoğun polietilen ara tabakanın sandviç edildiđi, yoğun dış polietilen tabaka ve yoğun polietilen içeren yara temas tabakasından oluşur.

#### Özellikler

- Kaymaz yüzey
- Yüksek Emilim gücü
- Yapışmaz
- Geçirgen
- Tıkanmayan
- Topikal Ajanlarla uyumludur



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriđi
5999004120	10cmx15cm	10
5999006	15cmx23cm	12
5999009	23cmx38cm	30
5999LPA	Kol Sargısı	20
5999LPL	Bacak Sargısı	20
5999LV1	Geniş Yanık Ceket	20
5999018	38cmx 46cm	30
5999024	38cmx61cm	30
5999L72	91x183cm	15
5999FM1	Erişkin Yüz Maskesi	20
5999M36	61x91	15

## PROGUIDE<sup>®</sup>

VARI-STRETCH<sup>®</sup> çok katlı Kompresyon bandajı sistemi (iki tabaka)

### Endikasyonlar

PROGUIDE<sup>®</sup> venöz bacak ülserlerinin tedavisinde ve ortak koşullarda kullanıma uygundur. Venöz bacak ülserlerinin tedavisi için geliştirilmiş etkili, kademeli kompresyon sağlayan bir bandaj sistemidir. Sistem paketi yaraya temas tabakası ile farklı basınçlar uygulayan iki bandajdan oluşur.

### Kontrendikasyonlar:

Arteriyel bacak ülserlerinin ve ilerlemiş kılcal damar hastalığı bulunan diyabetik ülserlerin tedavisinde kullanılmamalıdır.



S&N Kodu

Tanım

Paket İçeriği

#### Kits

66000780	18-22cm (Kırmızı kit)	8
66000781	22-28cm (Sarı kit)	8
66000782	28-32cm (Yeşil kit)	8



## INTRASITE<sup>◊</sup> Gel

### Amorfus Hidrojel Yara Sargısı - Steril

Intrasite Jel hızlı ama nazik nekrotik doku debridmanını tetiklerken, balçıkımsı yapıda dokunun ve aşırı eksudanın da emilimine imkan tanır. Granulizasyon ve epitelizasyon aşamalarında optimum nemli yara iyileşme ortamı sağlar. Bu özellik INTRASITE<sup>◊</sup> Jel'i yara iyileşmesinin her aşamasında ideal kılar.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
7308	APPLIPAK 8g	10
7311	APPLIPAK 15g	10
7313	APPLIPAK 25g	10

## INTRASITE<sup>◊</sup> Conformable

### Intrasite Jel İçeren Dokumasız Materyal - Steril

INTRASITE<sup>◊</sup> conformable örtü yaradaki nekrotik dokuyu rehidrate ederek ve balçıkımsı yapıda parçaları da emerek yumuşak ama etkili bir debridman ve toplama etkisi yaratır. Örtü ayrıca aşırı eksudayı absorbe eder. INTRASITE<sup>◊</sup> Conformable farklı şekildeki yaralara uyum sağlar. Derin yaraların tabandan başlayarak iyileşmesini imkan tanırken yaraların zamanından önce kapanmasını engelleyen bariyer sistemi sağlar.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66000324	10cm x 10cm (7.5g Jel)	10
66000325	10cm x 20cm (15g Jel)	10
66000326	10cm x 40cm (30g Jel)	10

## IODOSORB®


### İyodinli Cadexomer Merhem/Örtü

Kronik eksudalı olan yara tedavilerinde kullanıma uygundur.

IODOSORB® hem Örtü hem de merhem şeklinde bulunmakta olup her iki çeşidi de aynı özelliği göstermektedir.

#### İyileşmeyi Hızlandırıcı

- **Akıllı**  
İyodinlerin kontrollü salınımı
- **İnteraktif**  
Antimikrobiyal etkinlikleri absorbe ederek interaktif yara temizliği sağlar
- **İyodin**  
Geniş Spektrumlu antimikrobiyal etki

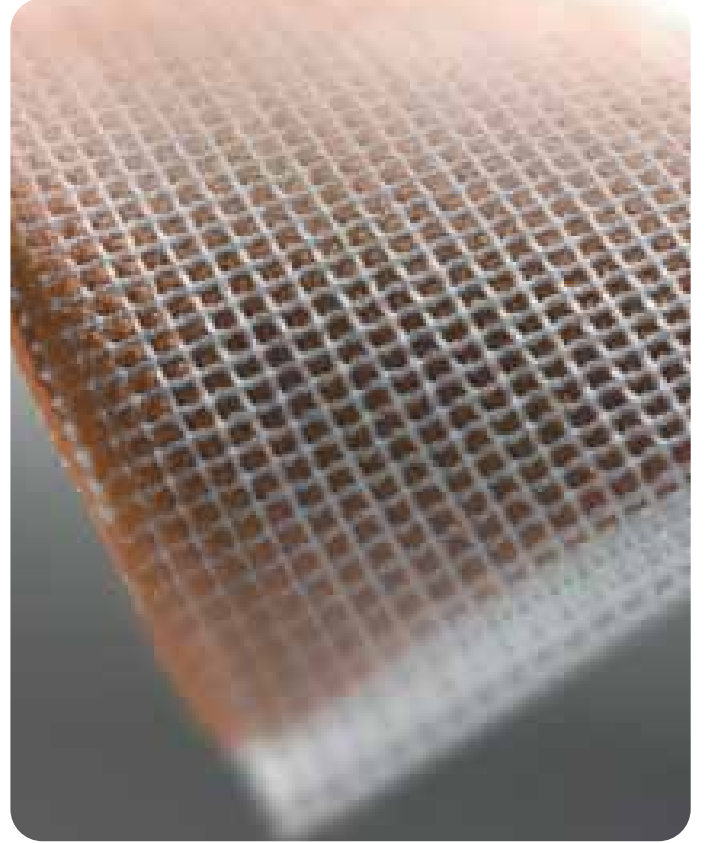

S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66001290	5 X 5G CE 6cm x 4cm	5
66001291	3 X 10G CE 8cm x 6cm	3
66001292	5 X 10G CE 8cm x 6cm	5
66001293	17G CE 10cm x 8cm	2
66001297	2 X 20 G TÜP	2
66001298	4x10 G TÜP	4
66001299	1x40 G TÜP	1




## IV3000<sup>®</sup>

### Buhar geçirgenli yapışkan film IV Örtü - Steril

IV3000<sup>®</sup> neme duyarlı şeffaf film örtüsü olup özellikle katateri sabitlemek ve katater bölgesini kuru tutmak amacıyla tasarlanmıştır.

IV3000<sup>®</sup>'un güvenli, emniyetli, düşük maliyetli bir katater sabitleyicisi olduğu ve IV girişi yeri için teknolojik avantaj sağladığı bağımsız klinik uzmanlar tarafından onaylanmıştır.

Çeşitli boyutlarda bulunması IV3000<sup>®</sup>'u periferik, santral ve epidural kataterler için uygun örtü haline getirir.

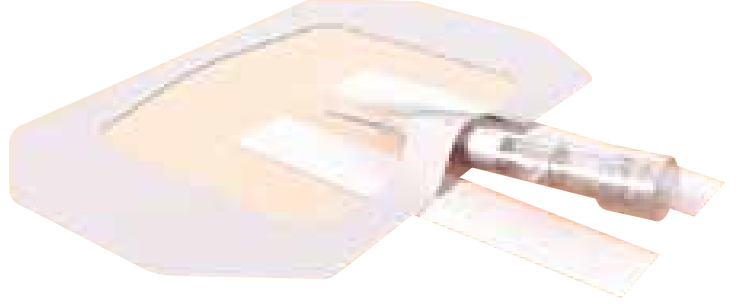

S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>Neme Duyarlı Katater Sabitleyici Steril Tek el stripli-etiketli</b>		
4006	7cm x 9cm, ported	100
4007	6cm x 7cm	100
4008	10cm x 12cm, Merkezi	50
<b>Neme Duyarlı Katater Sabitleyici, Steril</b>		
4649	10cm x 20cm Epidural Katater	50
4923	6cm x 8cm (Taşınabilir)	100
4924	6cm x 8.5cm (Taşınmaz Periferal)	100
4925	10cm x 14cm (Merkezi)	10
4973	10cm x 14cm (Merkezi)	50
66004009	9cm x 12cm (Merkezi Katater)	50
<b>Window Frame - IV3000 Frame Delivery</b>		
59410082	6cm x 7cm	100
59410882	10cm x 12cm	50

## JELONET®

### Parafinli Tül Sargı - Steril

JELONET® açık örgü tülde oluşan parafinli steril örtüdür. Gazlı bezin dizme iplikleri tül örtünün kesilmesi sırasında oluşabilecek aşınmaları, yıpranmaları engeller. Jelonet yatıştırıcı ve az yapışkan özelliği sayesinde yara sızıntısının rahatça emici olan ikincil pansumana geçmesine yardımcı olur.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
<b>Parafin Tül Sargı</b>		
7403	5cmx5cm	50
7404	10cmx10cm	10
7409	10cmx10cm	100
7415	15cmx2cm Rulo	12
7459	10cmx40cm	10

## MELOLIN<sup>®</sup>

### Az-Yapışkan Emici Örtü - Steril

MELOLIN<sup>®</sup> bir yüzü çok ince gözenekli bir polyester film tabakasına ısı ile birleştirilmiş olan, emiş gücü yüksek bir pamuklu ve akrilik pedden oluşur. Sargının parlak yüzü yaraya gelecek şekilde uygulanır. Düşük yapışma özelliği olan emici örtü hafif - orta şiddette yara eksudalarında kullanılır:

- Temiz ve sütür atılmış yaralarda
- Sıyrık ve kesiklerde
- Küçük yanıklarda kullanıma uygundur.







S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66974930	50cm x 7m Non-Sterile	Tek
66974939	10cm x 20cm Steril	100
66974940-S	5cm x 5cm Steril	100
66974941-S	10cm x 10cm Steril	100



## OPSITE<sup>®</sup> Flexigrid

Nem-Buhar geçirgen yapışkan film örtü - Steril

OPSITE<sup>®</sup> Flexigrid şeffaf yapışkan ve nem-buhar geçirgenliği olan uyumlu, uzatılabilir rahat kullanımlı bir film örtüdür. Yüzeysel yaralar için nemli yara iyileşme ortamı sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır, ayrıca ikincil pansuman olarak kullanıma uygun ve bası yaralarını önlemede yardımcıdır.

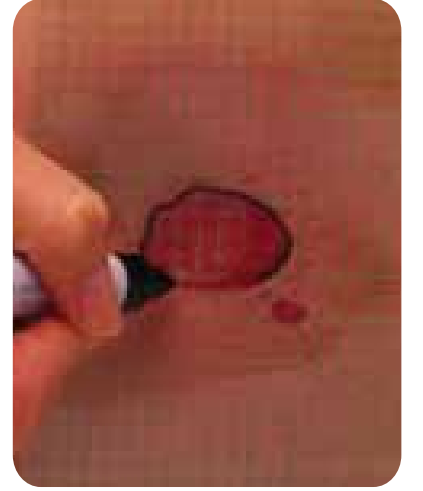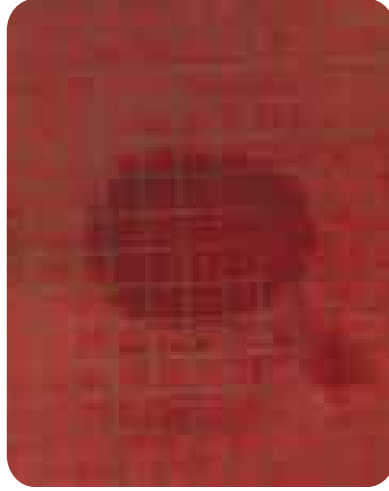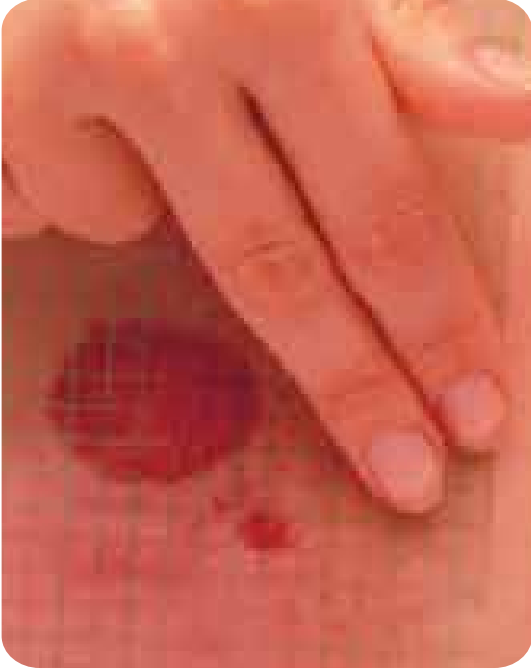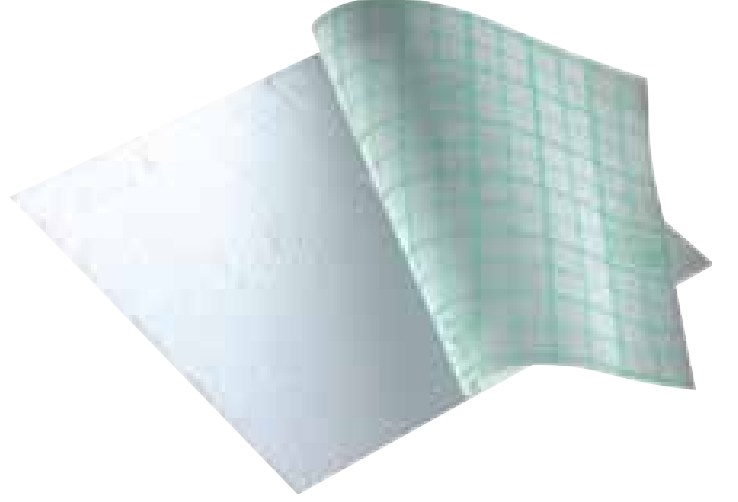

S&N Kodu

Tanım

Paket İçeriği

4628	6cm x 7cm	100
4629	10cm x 12cm	10
4630	10cm x 12cm	50
4631	15cm x 20cm	10
4632	12cm x 25cm	20



## OPSITE<sup>®</sup> Flexifix

### Şeffaf Film Rulo (Non Steril)

OPSITE<sup>®</sup> Flexifix Şeffaf, yapışkan film rulodur sabitleme ve cilt koruma amaçlı örtüdür.

#### Kullanım Alanları:

Diyabetik kaynaklı nöropatik ağrıların azaltılmasında  
İlk örtünün sabitlenmesinde,  
Bası yarası profilaksisinde  
Stoma cihazları ve bacak idrar torbası altındaki cildin korunması



#### S&N Kodu

#### Tanım

#### Paket İçeriği

66000040  
66000041  
66000375

5cm x 10m  
10cm x 10m  
15cm x 10m

Tek  
Tek  
Tek



## OPSITE<sup>®</sup> Incise

### Yapışkan İnsizyon Drape

OPSITE<sup>®</sup> insizyon drape ciltle birlikte nefes alan şeffaf, yapışkan poliüretan bir film örtüdür; böylece nemin drapenin altında birikmesini engeller. Sonuçta OPSITE<sup>®</sup> Incise uzun süren ameliyatlarda ameliyat bölgesinin etrafına ve daha da önemlisi ameliyat yarasının kenarlarına yapışarak enfeksiyona neden olabilecek bakterilerin ameliyat bölgesine lateral geçişine engel olur.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
4975	10cm x 14cm	50
4986	15cm x 28cm	10
4987	30cm x 28cm	10
4988	45cm x 28cm	10
4989	45cm x 55cm	10
4994	56cm x 84cm	10
4995	40cm x 42cm	10

## OPSITE<sup>®</sup> Post-Op

### Su Geçirmez, Bakteri Geçirmez Örtü - Transparan

OPSITE<sup>®</sup> Post Op yenilikçi bir ameliyat sonrası örtüsüdür, yüksek nem buhar geçiş hızı (MVTR) olan film tabaka ile yastık görevi gören emici az yapışkan pedin ve kolay uygulanabilir sistem özelliklerini bir arada bulundurur.

Eşsiz ızgara şekilli OPSITE<sup>®</sup> Post Op yapışkanı "tepkisel" özelliindedir nemin varlığında devreye sokulur ve yüksek geçirgenliğe sebep verir.

Su geçirmez filmi sayesinde OPSITE<sup>®</sup> Post Op hastanın örtüyle sorunsuz olarak banyo yapma fırsatını sunar.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66000708	6.5cm x 5m	100
66000709	9.5cm x 8.5m	20
66000710	12cm x 10cm	10
66000712	15.5cm x 8.5m	20
66000713	20cm x 10cm	20
66000714	25cm x 10cm	20
66000715	30cm x 10cm	20
66000716	35cm x 10cm	20




## OPSITE<sup>®</sup> Post-Op Visible

Su geçirmez, bakteri geçirmez emici Pedli OPSITE<sup>®</sup> Post - Op Görünür Örtü

OPSITE<sup>®</sup> Post Op Visible yenilikçi ve özgün tasarımıyla yarayı sürekli dışardan gözleme imkanı tanıyarak iyileşme aşamasında olan yaranın üzerindeki sargının açılıp sıkça değiştirilmesini engeller.

### Endikasyonlar

Özellikle az- orta derecedeki eksudası olan akut yaralar, ameliyat kesikleri ve hafif yanıklar için tasarlanmıştır.

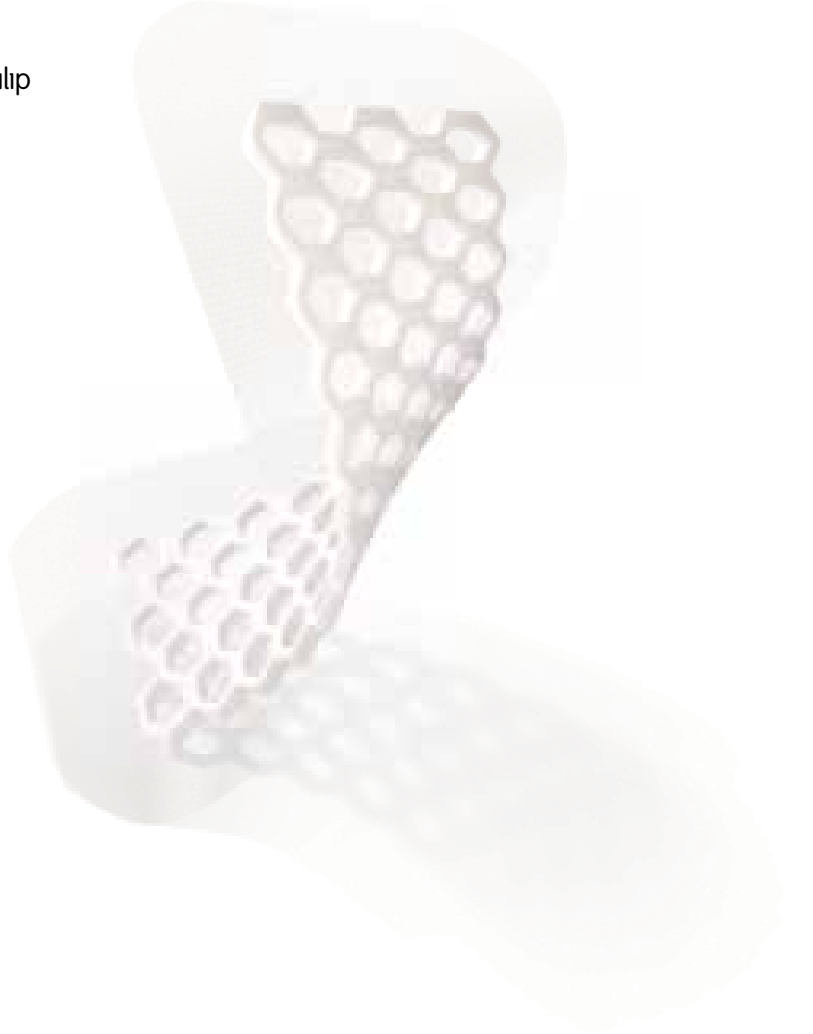

### S&N Kodu

### Tanım

### Paket İçeriği

66800136-S	10cm x 8m	20
66800137-S	15cm x 10m	20
66800138-S	20cm x 10cm	20
66800139-S	25cm x 10m	20
66800140-S	30cm x 10cm	20
66800141-S	35cm x 10cm	20



## OPSITE<sup>®</sup> Sprey

### Kuru Yaralar için Şeffaf Sprey Sargı

OPSITE<sup>®</sup> Sprey şeffaf ve çabuk kuruyan bir film tabakadır uygulaması oldukça rahat ve kolaydır. Kuru minör cerrahi ve yüzeysel yaraları koruma imkânı sağlar. OPSITE<sup>®</sup> Sprey nem, buhar ve havayı geçirme özelliği gösterir böylece etraftaki derinin nefes alarak maserasyonun önlenmesi sağlanır.



S&N Kodu

Tanım

Paket  
İçeriği

**Su Geçirmez Sprey Aerosol Teneke Kutu**

66004979

100ML

12

66004980

240ML

12




## PRIMAFIX<sup>®</sup>

### Hipoalerjik dokumasız sabitleme Sargısı

PRIMAFIX<sup>®</sup> dokumasız hipoalerjik akrilik yapışkan ile kaplı tutma Bandajdır.

PRIMAFIX<sup>®</sup> güvenli ve sıkı bir bandajlama ile birlikte eklem bölgelerinin hareketini kısıtlamaz. Böylece hastalara güvenli ve rahat hareket etme olanađı sağlar. Bantın hava ve buhar geçirgenliđi sayesinde alttaki derinin hava almasını sağlar.

PRIMAFIX<sup>®</sup> aynı zamanda X ışını indiferantdır ve bu sebepten X ışını incelemeleri için engel deđildir.

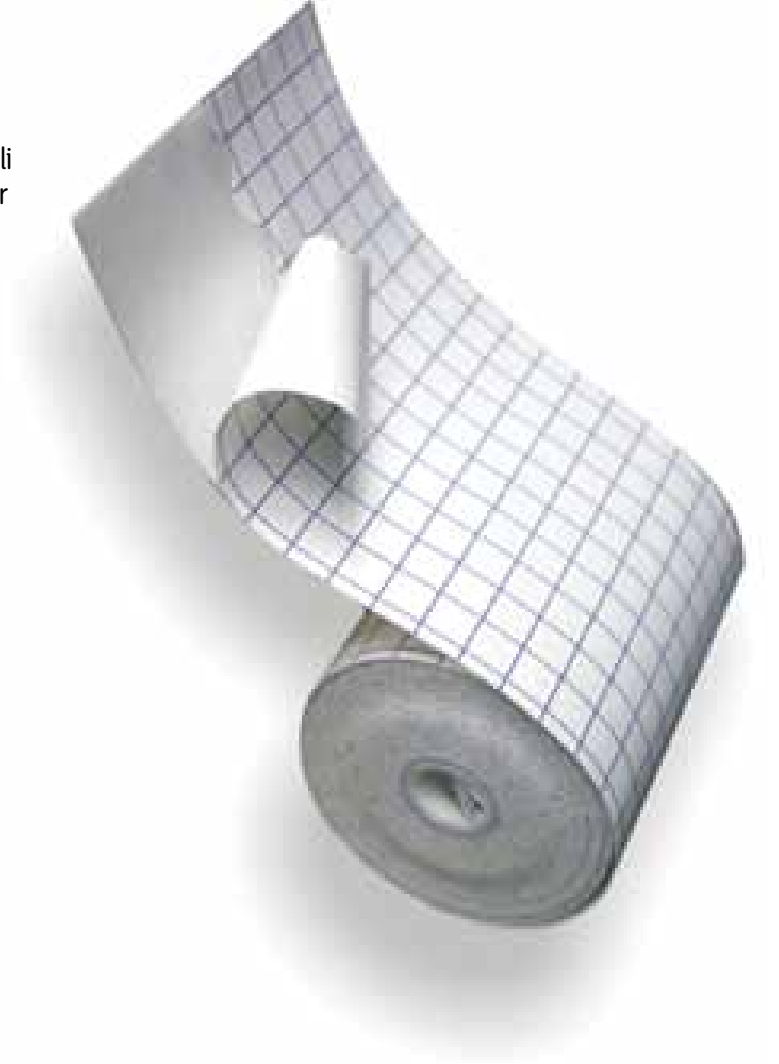

#### S&N Kodu

#### Tanım

#### Paket İçeriđi

66800151	5cm x 10m Rolls	12
66800152	10cm x 10m Rolls	12
66800153	15cm x 10m Rolls	12
66800154	20cm x 10m Rolls	12



## PRIMAPORE<sup>®</sup>

### Yapışkan kenarlı emici pansuman - Steril

PRIMAPORE<sup>®</sup> Yapışkan Yara Sargısı yumuşak, rahat ve uyumludur. Kalın ve oldukça emici olan orta yüzey etkili bariyer işlevi görürken, sıvının üst yüzeye çıkmasını engeller. Az yapışkan olma özelliği sayesinde yara temas yüzeyi sargıyı çıkarırken bile temas ettiği dokulara zarar vermez ve ağrıyı azaltır.



S&N Kodu	Tanım	Paket İçeriği
66000317-S	10cm x 8cm	20
66000318-S	15cm x 8cm	20
66000319-S	20cm x 10cm	20
66000320-S	25cm x 10cm	20
66000321-S	30cm x 10cm	20
66007140-S	35cm x 10cm	20
7135-S	8.3cm x 6cm	50

## VERSAJET<sup>®</sup>

### Hidrocerrahi Sistemi

VERSAJET<sup>®</sup> hidrocerrahi sistemi yara debridmanını da içeren farklı operasyonlarda dokuları yaradan kesmek, çekmek ve çıkarmak işlevleri için kullanılır.



## VERSAJET<sup>®</sup> II

### Hidrocerrahi Sistemi

VERSAJET<sup>®</sup> II cerrahi yara debridmanı sırasında canlı dokuların korunmasını sağlarken Aerodinamik eksizyon yöntemi yaranın erken kapanmasına yardımcı olarak devamlı klinik etki gösterir, ekonomik kullanımı ile zamandan tasarruf sağlar.







#### S&N Kodu

#### Tanım

10000511	Versajet Hidrocerrahi Sistemi – UK Güç Masası ve Kordonu
50700	Versajet Hidrocerrahi Sistemi – Güç Masası, 115V, Ayak pedalı ve Güç Kordonu
50750	Versajet Hidrocerrahi Sistemi – Güç Masası, 230V, Ayak Pedalı ve Güç Kordonu
50800	Versajet Hidrocerrahi Sistemi – Montaj Masası Kart
50635	Versajet Exact Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 15Deg/14mm, Tüp Seti dahil, Steril
50636	Versajet Exact Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 45Deg/14mm, Tüp Seti dahil, Steril
50637	Versajet Exact Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 45Deg/8mm, Tüp Seti dahil, Steril
52635	Versajet Plus Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 15Deg, 14mm
52636	Versajet Plus Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 45Deg, 14mm
52637	Versajet Plus Hidrocerrahi Sistemi – Handpiece – Tek Kullanımlık, 45Deg, 8mm
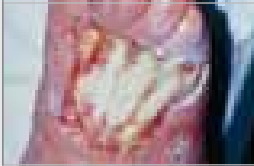
# TIME\* Smith & Nephew ile optimal iyileştirme için hazırlık

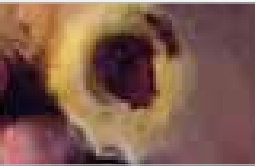Yara Etkenleri		Klinik İşlem		Tavsiye Edilen Ürün		Öngörülen İyileşme	
<b>T</b> Ölü Doku Nekrotik ya da balçıkimsi yapıda balçıkimsi yapıda doku	→	Hasarlı Dokunun Çıkarılması Debridman	→	INTRASITE® Gel INTRASITE® Conformable VERSAJET®	→	Canlı (Damarlanmış) Yara yatağı	
<b>I</b> Enflamasyon ve/veya Enfeksiyon Artan miktarda eksuda, yüzeyde renk değişimi ve artan koku	→	Bakteri yükünü yok etmek ya da azaltmak Antimikrobiyal Sargı ile Cansız dokuların debridmanı	→	ACTICOAT® ALGISITE® AG ALLEVYN® AG IODOSORB®	→	Bakteri yük miktarı ve enflamasyon azalması	
<b>M</b> Nem Dengesizliği Yoğun eksuda, maserasyon riski-kuruma riski, kuru yara yatağı	→	Nem Dengesini düzenler - restore Eksuda emer veya kuru yaraya nem kazandırır	→	ALLEVYN® Range ALLEVYN® Gentle	→	Optimal nem dengesi	
<b>E</b> İlerleyemeyen ya da tünellenmiş Yara Kenarı e.g Kronik yarada uzamış inflamasyon süresi	→	Önceki uygulamaları yeniden Değerlendirmek T, I ve M. Alternatif tedaviye cevap vermeyen dokulara yeni bir tedavi uygulamak	→	NPWT® PELNAC®	→	Yara 2-4 hafta sonra da aynı durumdaysa yapılan uygulamaları değerlendirin ya da uzmana danışın	

# İNDEKS

## Antimikrobiyeler

ALGISITE° Ag	8
ALLEVYN° Ag	13
IODOSORB°	22

## Antimikrobiyel Bariyer Örtüleri

ACTICOAT°	4
ACTICOAT° 7	4
ACTICOAT° FLEX 3	5
ACTICOAT° FLEX 7	5
ACTICOAT° SITE	7

## Nemli Yara Tedavi Örtüleri

ACTICOAT° Absorbent	6
ALLEVYN° Sacrum / Ag Sacrum	13
ALLEVYN° Non Adhesive	10
ALLEVYN° Ag Gentle	11
ALLEVYN° Gentle Border	11
ALLEVYN° Heel / Ag Heel	12
ALLEVYN° Tracheostomy	14
ALGISITE° M	9
OPSITE° Flexigid	26

## Ameliyat sonrası Örtüler (Sargılar)

OPSITE° Post Op	29
OPSITE° Post – Op Visible	30

## Kavite (oyuk) Örtüleri

ALLEVYN° Cavity	15
INTRASITE° Conformable	21

## Örtü (Sargı)

PRIMAFIX°	32
-----------	----

## Sabitleyici

IV3000°	23
---------	----

## Hidrojel

INTRASITE° Gel	21
INTRASITE° Conformable	21

## İnsizyon Drapel

OPSITE° Incise	28
----------------	----

## Skar Tedavisi

CICA–CARE°	18
------------	----

## Şeffaf Film Örtüsü

OPSITE° Flexifix	27
------------------	----

## Şeffaf Sprey Örtü

OPSITE° Spray	31
---------------	----

## Hidrocerrahi Sistem

VERSAJET°	34
VERSAJET° II	34

## Az Yapışan Örtüler (Sargı)

BACTIGRAS°	16
BIOBRANE°	17
EXU-DRY°	19
JELONET°	24
MELONIN°	25
PRIMAPORE°	33



**Türkiye Distribütörü**

*pharmex* 

TAYMED Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  
Büyükdere Cad.Emlak Kredi Blokları A-1 Kat 2 D  
10-11 Levent/Istanbul  
T: +90 212 324 2190  
F: +90 212 280 7042

Email: [info@pharmexx-tr.com](mailto:info@pharmexx-tr.com)  
[www.pharmexx-tr.com](http://www.pharmexx-tr.com)

**Wound Management**

Smith & Nephew FZE  
P O Box 9715, Dubai, U.A.E.  
Email: [snfze@emirates.net.ae](mailto:snfze@emirates.net.ae)  
Website: [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

T +971 4 4299111  
F +971 4 4299100

[www.smith-nephew.com/wound](http://www.smith-nephew.com/wound)

◊Trademark of Smith & Nephew  
© Smith & Nephew November 2011-2012